

Pedido de diligência

3 mensagens

Santana do Cariri <licitasantana2021@gmail.com>
Para: Alves Consultoria <alvesconsultoria2020@gmail.com>

21 de setembro de 2022 15:40



Prezado, boa tarde, solicitamos a Empresa MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L, resposta no prazo máximo de **01 (Um dia) útil, ou seja, até o dia 23/09/2022**, quanto ao questionamento pela empresa BIOCORE COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSP E LABORATO, que segue anexo. Processo de pregão eletrônico nº29.08.2022.01-SRPE, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de fórmula para nutrição enteral visando atender as demandas da secretaria de saúde do município de Santana do Cariri-Ce, realizado através da plataforma do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SANTANA DO CARIRI-CE

 diligência 01.pdf
1153K

Alves Consultoria <alvesconsultoria2020@gmail.com> 23 de setembro de 2022 08:51
Para: Santana do Cariri <licitasantana2021@gmail.com>
Cc: André Bindá <andre@medicalcenterce.com.br>, Fayad <fayad@medicalcenterce.com.br>

Ilmo. Sr. Pregoeiro, bom dia.

Segue em anexo resposta à diligência promovida por esta Comissão de Licitação em face aos questionamentos da empresa Biocore.

Ainda quanto a utilização das dietas envasadas em sistema easybag, segue link para vídeo explicativo promovido pela fabricante do produto (Fresenius- Kabi):

<https://www.fresenius-kabi.com/br/produtos/administracao-da-dieta>

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,



ISAAC ALVES
ANALISTA DE LICITAÇÕES

✉ ALVESCONSULTORIA2020@GMAIL.COM
☎ (85) 99174-3640
📞 (85) 99150-2026

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 Resposta aos questionamentos do PE29.08.202201 da PM de Santana do Cariri - timbrado.zip
11108K

Para: Alves Consultoria <alvesconsultoria2020@gmail.com>

Bom dia, acusamos o recebimento!

[Texto das mensagens anteriores oculto]





DILIGÊNCIA

REF.: RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA BIOCORE COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSP E LABORATO, REFERENTE AOS ITENS COTADOS E ARREMATADOS PELA MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO PE 29.08.2022.01 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE.

A empresa MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi declarada vencedora, após a fase de lances, nos itens 01 e 02 do pregão 29.08.2022.01-SRPE. No entanto, a empresa BIOCORE COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSP E LABORATO questionou a possibilidade de uso, das referidas dietas vencedoras, **Fresubin HP Energy 1L e Fresubin 1.2 HP Fibre 1L (marca Fresenius-kabi)**, como **sistema aberto**. Além disso, informou que a bolsa, “**após aberta, não tem como manter a embalagem na posição vertical podendo ocasionar assim desperdício**”. Ainda relata, que a dieta “**sistema fechado (Easy Bag), quando usado em domicílio, ou requer os acessórios de bomba de infusão e equipo ou se optado pela transferência para um outro recipiente requer o uso de adaptador**”

Antes de respondermos aos questionamentos, é importante ressaltar que as dietas **Fresubin HP Energy EB 1L e Fresubin 1.2 HP Fibre 1L (Marca Fresenius-Kabi)**, arrematadas nos respectivos itens 01 e 02 do referido edital, atendem perfeitamente ao solicitado nos descritivos quanto as suas composições nutricionais e oferta de nutrientes aos pacientes.

A Fresenius-kabi, presente no Brasil há 45 anos, é uma empresa de assistência médica global especializada em medicamentos capazes de salvar vidas, bio-similares, tecnologias para infusão, transfusão e **nutrição clínica**. Quanto a tecnologia desenvolvida e implantada na bolsa **EasyBag**, está possui mais de 20 anos no mercado nacional e internacional, proporcionando **segurança e conveniência** aos profissionais durante a administração da nutrição enteral. Dentre os benefícios deste novo conceito de embalagem, o Easybag é uma bolsa **resistente, com sustentação vertical** e é a **única a possuir uma membrana auto cicatrizante, que evita o contato da dieta enteral com o ar** do meio ambiente, reduzindo risco de contaminação da dieta e, conseqüentemente, alterações organolépticas na fórmula. Ao contrário, a **dieta em Tetra Pack em Sistema aberto** não possui esse tipo de segurança, ficando a dieta em contato direto com o ar, proporcionando, assim, um maior risco de contaminação e alterações na fórmula.

Pensando nos pacientes que **não necessitam de bomba de infusão** e estão em domicílio, a Fresenius-kabi desenvolveu um dispositivo prático e que possibilita o uso de suas dietas em sistema Easybag como **sistema aberto, o fracionador**. O **FRACIONADOR** de dieta possibilita o envase em frasco adequado para administração **COMPATÍVEL COM SISTEMA ABERTO**. Ressalta-se que a utilização do **FRACIONADOR** de dieta **não acarreta nenhum tipo de prejuízo, riscos, ou perdas de produtos para o usuário**, sejam estes de natureza econômica, microbiológica/controlado de qualidade ou durante o manuseio.



O **Fracionador de EasyBag** é uma tecnologia especialmente desenvolvida para facilitar a retirada da dieta enteral do sistema Easybag e, assim, realizar o porcionamento em frascos de acordo com a prescrição do médico e/ou nutricionista. É uma tecnologia que possui **registro na ANVISA (Nº80305560062), possuindo regulamentação e autorização para ser usado, com praticidade e segurança, na transformação do sistema fechado em sistema aberto**. O dispositivo Fracionador de EasyBag é embalado em papel grau cirúrgico, estéril, unitário, com ponta EN Plus exclusiva para Nutrição Enteral, com tampas protetoras nas duas extremidades. A sugestão de uso é de 01 unidade/dia, considerando a higienização do dispositivo a cada fracionamento de dieta e não acarretará nenhum custo a mais para esta doura instituição.


Além de garantir a segurança e praticidade, o sistema Easybag possui uma **membrana auto cicatrizante** que mantém o sistema fechado após a retirada do Fracionador. Isso garante a **esterilidade** e mantém a segurança após aberto. Além disso, **após aberto o sistema pode ser utilizado em um prazo de 24h**.

Abaixo seguem informações do **FRACIONADOR** que será ofertado sob forma de bonificação para cada litro de dieta solicitada pela instituição. Também, estamos enviando um vídeo institucional desenvolvido pela Fresenius-kabi que demonstra o passo a passo referente ao uso do fracionador e a transformação em sistema aberto.

- INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: DISPOSITIVO FRACIONADOR DE EASYBAG

1. Agite o EasyBag.
2. Remova o lacre do EasyBag.
3. Abra a embalagem do **Fracionador** do EasyBag e remova a tampa protetora do dispositivo.
4. **Conecte o Fracionador** ao EasyBag, tomando o cuidado de rosquear completamente o dispositivo no orifício (acesso) do EasyBag.
5. Posicione cuidadosamente o fracionador, já conectado ao EasyBag, dentro do orifício de entrada do frasco de dieta.
6. Coloque a quantidade de dieta desejada/prescrita para este horário de administração de dieta.
7. Coloque a tampa no frasco de dieta e siga com a administração conforme orientação de seu Nutricionista.
8. **Remova o dispositivo Fracionador**, tomando o cuidado de desrosquear completamente do orifício do EasyBag. **IMPORTANTE:** o fracionador deve ser removido do EasyBag a cada término de envase da dieta. Desta forma a membrana auto cicatrizante presente no orifício de conexão do EasyBag se fechará, impedindo o vazamento da dieta ou entrada de ar no interior da embalagem.
9. Imediatamente lave o Dispositivo em água corrente potável ou filtrada, evitando que fique resíduos de dieta no interior do dispositivo. Coloque as tampas protetoras nas duas extremidades e guarde o dispositivo em local seguro.
10. Armazenamento do EasyBag com o uso do fracionador: após a 1ª conexão do fracionador no orifício do EasyBag, temos 24h para administrar todo o conteúdo da dieta.

ILUSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO FRACIONADOR + DIETA ENTERAL EM SISTEMA FECHADO EASYBAG + FRASCO PARA DIETA ENTERAL

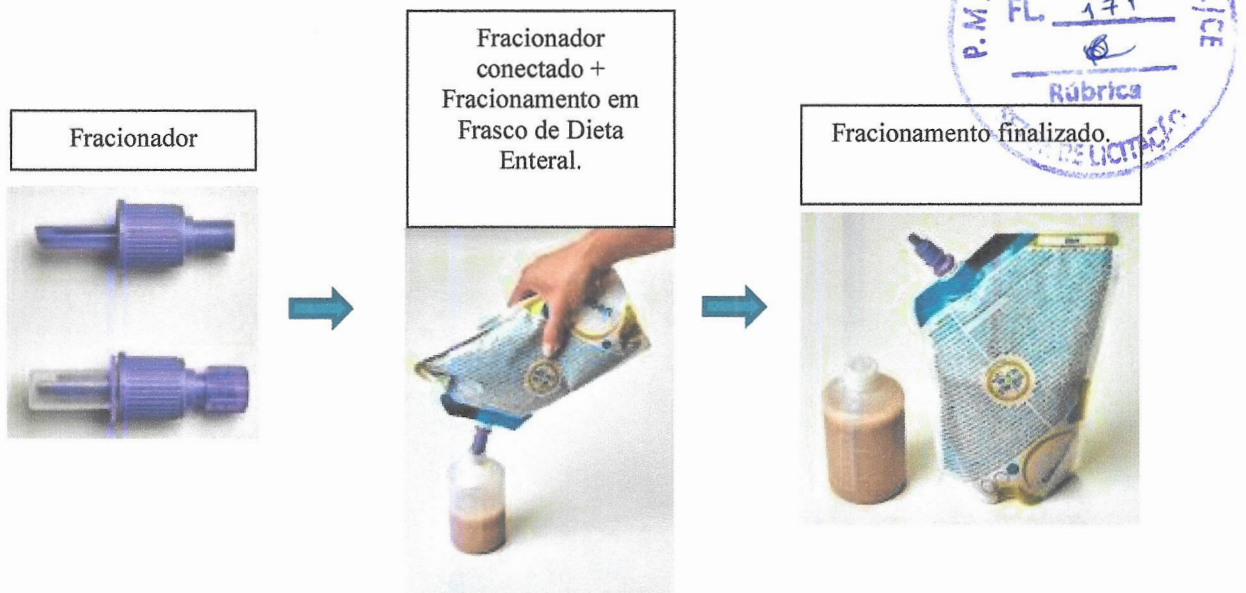

Após as argumentações realizadas acima podemos afirmar que as dietas **Fresubin HP Energy 1L e Fresubin 1.2 HP Fibre 1L (marca Fresenius-kabi)** podem ser utilizadas como **sistema aberto**, através do uso do **fracionador**; sua embalagem **Easybag tem sustentabilidade vertical** que **evita desperdício** (como observado nas figuras acima); e traz maior segurança ao paciente, pois, sua membrana auto cicatrizante evita o contato direto da dieta com o ar.

Nesse contexto, a empresa Biocore se manifesta de maneira equivocada ao afirmar tais inverdades, já que as informações repassadas não são corretas. Sendo importante ressaltar mais uma vez que a tecnologia utilizada nas embalagens Easybag das dietas enterais da Fresenius-Kabi **está em conformidade com as resoluções da ANVISA, assim como o uso do fracionador**; possuindo total segurança para serem utilizadas como **Sistema Aberto**, a critério do prescritor.

Com o objetivo de dar suporte aos argumentos aqui narrados, seguem em anexo material explicativo, assim como, um vídeo referente ao passo a passo das instruções de uso do sistema Easybag como Sistema Aberto. Por fim, ressaltamos que estamos à disposição dessa douta instituição quanto ao suporte técnico e quaisquer esclarecimentos necessários quanto ao uso das dietas enterais com sistema Easybag da Fresenius-kabi. **relo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.**

Lauro de Freitas/BA, 23 de setembro de 2022

RAIMUNDO JOSE MOREIRA SANTOS
22986251587

Assinado digitalmente por RAIMUNDO JOSE MOREIRA SANTOS:22986251587
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25199364000173, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=RAIMUNDO JOSE MOREIRA SANTOS:22986251587
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.23 08:46:10-03'00
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

RAIMUNDO JOSÉ MOREIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 2364962-39 - SSP/BA
MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ 07.032.320/0001-72

Kabi em Casa

EasyBag Fracionado:
Versatilidade na administração da TNE*
do paciente em casa.


(* Terapia Nutricional Enteral)



Men Fresubin

Fracionador de EasyBag


Deseja fracionar o EasyBag em frascos de dieta?

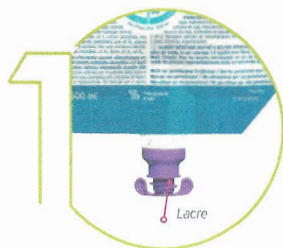

1 Agite o EasyBag e remova o lacre da embalagem com um movimento de rosca.



2 Retire o Fracionador da embalagem. Remova a tampa (da extremidade ENPLUS) protetora do dispositivo.

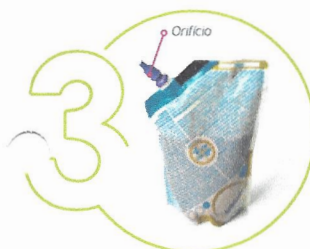

3 Coloque o EasyBag na posição vertical, apoiada em uma bancada limpa. Conecte o Fracionador ao EasyBag, tomando o cuidado de rosquear completamente o dispositivo no orifício de acesso do EasyBag.



4 Pegue o frasco de dieta e remova a tampa.



5 Retire a tampa do Fracionador e posicione-o no orifício de entrada do frasco, transferindo a quantidade de dieta prescrita para o horário.



6 Coloque o EasyBag novamente na posição vertical apoiado numa bancada limpa. Feche o frasco de dieta com sua tampa.



7 Remova o Fracionador desrosqueando-o completamente do EasyBag. Elimine todo resíduo de dieta lavando-o com água corrente potável. Recoloque as tampas de proteção nas extremidades do Fracionador e guarde-o em local seguro.



8 Siga as orientações de seu nutricionista e/ou médico quanto à administração da dieta enteral ao seu paciente.



9 **Não se esqueça das vantagens do seu EasyBag!**



• Possui membrana autocicatrizante, permitindo desconectar o Fracionador sem vaziar dieta.



• Com o uso do Fracionador o EasyBag poderá permanecer em temperatura ambiente por até 6h;
• Após 6h, o EasyBag deverá ser acondicionado em geladeira por até 18h, completando 24h após a 1ª conexão do Fracionador.

Nota:

Recomenda-se substituir o Fracionador de EasyBag a cada 24h.